

Phonak Bolero™ B

Produktinformation



Phonak Bolero B är ett omfattande sortiment av bakom-örat apparater för lätta till
grava hörselnedsättningar. Phonak Bolero B inkluderar fyra modeller och tre
funktionsnivåer, inklusive en laddningsbar bakom-örat apparat med telespole och
volymkontroll.. Med hjälp av den innovativa teknologin hos Phonak Belong-
plattformen är Phonak Bolero B-hörapparaterna den perfekta lösningen för de klienter
som vill ha bästa möjliga funktion i en bakom-örat apparat.

För detaljerad information hänvisas till www.phonakpro.se

Produktbeskrivning



Bolero B-M
B90/B70/B50



Bolero B-P
B90/B70/B50



Bolero B-PR
B90/B70/B50




Bolero B-SP
B90/B70/B50


Storlek på zink-/luftbatteri		312	13			13			
Tryckknapp (program/volym)		•	•	•	•	•			
Volymkontroll			•	•	•	•			
Telespole		•	•	•	•	•			
EasyPhone		•	•	•	•	•			
Nanohölje		•	•	•	•	•			
IP-märkning		IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹			
Mått	L x B x D	29,5 x 13 x 7,4 mm (1,16 x 0,1 x 0,29 tum)	33,1 x 16,3 x 8,6 mm (1,30 x 0,1 x 0,34 tum)	35,9 x 15,9 x 8,7 mm (1,41 x 0,63 x 0,34 tum)	37,2 x 16,6 x 8,7 mm (1,46 x 0,65 x 0,34 tum)				
	Vikt	1,9 g	2,7 g	3,2 g	3,5 g				
Livslängd för laddningsbara litium-jon-batterier ²	Ingen streaming			24 tim					
	5 tim streaming			20 tim					
	10 tim streaming			16 tim					
Laddningstider ³	0 % till 100 %			3 tim					
	0 % till 80%			1,5 tim					
	30 min. anpassning			10 min					
		SlimTube HE	HE 10 680	SlimTube HE	HE 10 680	SlimTube HE	HE 10 680	SlimTube HE	HE 10 680
Max utnivå (dB SPL)	2 cc coupler	122	129	126	131	126	131	128	131
	Öronsimulator	126	134	130	135	130	135	132	137
Max förstärkning (dB)	2 cc coupler	56	63	58	66	58	66	68	71
	Öronsimulator	60	68	62	71	62	71	72	75
Frekvensområde – Öronsimulator (Hz)		<100–6 600	<700–6 300	<100 - 5500	<100 - 5500	<100 - 5500	<100 - 5500	<100 - 6000	<100 - 6100
Strömförbrukning – Öronsim., HE 10 680 (mA)		1,2		1,2				1,2	

Anpassningsområde


SlimTube HE
 Vanlig ljudslang

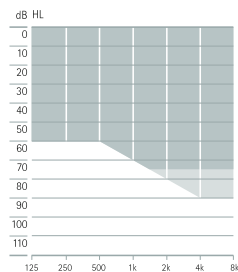


Lätt till måttlig-grav hörselnedsättning, alla audiometriska konfigurationer

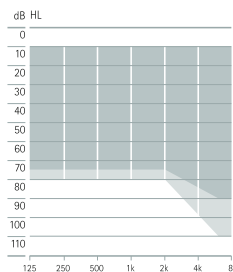

Lätt till grav hörselnedsättning, alla audiometriska konfigurationer

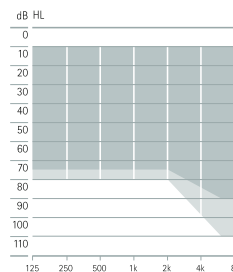

Lätt till grav hörselnedsättning, alla audiometriska konfigurationer

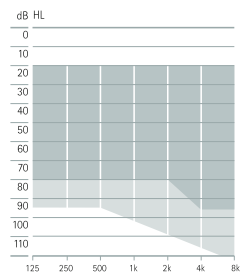

Måttlig till mycket grav hörselnedsättning, alla audiometriska konfigurationer

¹ IP68 visar att hörapparaten är vattenskyddad och dammtät.. Den har blivit godkänd i test där den kontinuerligt har nedsänkts i 1 meter djupt vatten i 60 minuter, samt förvarats i en dammkammare i åtta timmar, enligt föreskrifter för standarden IEC60529. Det fanns inga spår av damm i höljet.

² Faktisk batteritid beror också på hörselnedsättningen, batteriets ålder och ljudmiljön.

³ Faktisk laddningstid beror på kvarstående batteritid, men överskrider inte 3 timmar.

Färger



P1

Sand Beige



P3

Sandalwood



P4

Chestnut



P5

Champagne



P6

Silver Gray



P7

Graphite Gray



P8

Velvet Black



T7

Alpine White



O1

Beige

Akustisk koppling

Ljudutgång	Slangfäste	Finns som dämpad (HE 10 680) och odämpad (HE10)	
	SlimTube HE	Tillgänglig som vänster, höger och i fyra olika längder (0, 1, 2, 3)	
Öroninsats	Dome	Öppen dome	Tillgänglig i tre storlekar (S, M, L)
		Stängd dome	Tillgänglig i tre storlekar (S, M, L)
		Power Dome	Tillgänglig i tre storlekar (S, M, L)
SlimTip	Hårt material	Ihåligt skal	
		Solitt skal	

Laddningsalternativ för Phonak Bolero B-PR



Phonak Charger Case BTE

Phonak Charger Case är en laddare, avfuktning och hårt skyddsfodral i ett. Det finns också ett rengöringsverktyg i det tåliga och stänkskyddade höljet som har utformats för två Bolero B-PR-hörapparater.



Phonak Power Pack

Om du behöver ladda Phonak Bolero B-PR när du är på språng, kan du enkelt sätta fast Phonak Power Pack mot undersidan av Phonak Charger Case. Den ger ström till 7 fulla laddningar av två Bolero B-PR-hörapparater.



Phonak Mini Charger bakom-örat-apparat

Phonak Mini Charger är en kompakt laddare för två Bolero B-PR-hörapparater.

Anpassning








Programvara

Phonak Target 5.1 eller senare





Programmeringsenhet

iCube II*, NOAHLink, HI-PRO, HI-PRO2

Trådlöst kommunikationssortiment

Trådlösa tillbehör	Bolero B-M B90/B70/B50	Bolero B-P B90/B70/B50	Bolero B-PR B90/B70/B50	Bolero B-SP B90/B70/B50
 Phonak DECT II	•	•	•	•
 Phonak PilotOne II	•	•	•	•
 EasyCall II	•	•	•	•
 Phonak ComPilot II	•	•	•	•
 Phonak ComPilot Air II	•	•	•	•
 Phonak TVLink II	• ¹	• ¹	• ¹	• ¹
 Phonak RemoteMic	• ¹	• ¹	• ¹	• ¹

¹ Kräver Phonak ComPilot II eller ComPilot Air II

Roger	Bolero B-M B90/B70/B50	Bolero B-P B90/B70/B50	Bolero B-PR B90/B70/B50	Bolero B-SP B90/B70/B50
 Roger 18		•		•
 Roger X/AS18		•		•
 Roger X/Phonak ComPilot II	•	•	•	•
 Roger MyLink	•	•	•	•

För information om Roger-mikrofoner, besök www.phonakpro.com/roger

Viktiga funktioner

AutoSense OS™

Hörapparaterna Bolero B, som använder nya AutoSense OS, identifierar och anpassar sig till flera lyssningsituationer än någonsin tidigare. AutoSense OS fångar upp och analyserar ljudmiljön med hög precision. Därefter blandas komponenter från flera program i realtid vilket resulterar i en sömlös lyssningsupplevelse.

Tal i bilen Minskar bredbandsbuller i bilen och skapar en stabil lyssningsmiljö där det är enkelt att kommunicera utan ansträngning.

Komfort i eko

Identifierar efterklangens frekvens och tillämpar en lämplig mängd förstärkningsminskning, vilket leder till mindre distorsion och gör tal behagligare.

Tal i starkt buller

Zoomar in på en enda röst i en diffus bullermiljö och ger bättre taluppfattning. Programmets huvudfunktion. StereoZoom, anpassar sig nu till rörliga och assymetriska bullerkällor, vilket ökar taluppfattningen med upp till 60%.¹

Tinnitusbalans brusgenerator

Tinnitusbalans brusgeneratoren kan aktiveras för att användas för hantering av tinnitus som till exempel Tinnitus Retraining Therapy.

¹ StereoZoom Förbättrad talluppfattning även med öppna anpassningar. Phonak Field Study News, april 2011

Funktionsnivåer

	Premium (B90)	Avancerad (B70)	Standard (B50)		Premium (B90)	Avancerad (B70)	Standard (B50)
AutoSense OS	Premium	Avancerad	Standard	Funktioner	Premium	Avancerad	Standard
Lugna situationer	•	•	•	UltraZoom			
Tal i buller	•	•	•	SNR-Boost	•	•	•
Komfort i buller	•	•	•	FlexControl	•	•	•
Musik	•	•		FlexVolume	•	•	•
Tal i starkt buller	•			DuoPhone	•	•	•
Tal i bil	•			SoundRecover	•	•	•
Komfort i eko	•			Brukarbaserad fininställning	•	•	•
Övriga program				Real Ear Sound	•	•	•
Max. ytterligare program	5	5	5	Finjusteringskanaler	20	16	12
Speech in Wind	•			WhistleBlock	•	•	•
Komfort i eko	•			NoiseBlock	•	•	•
Tal i starkt buller	•	•		WindBlock	•	•	
Tal i 360°	•	•		EchoBlock	•		
Tal i buller	•	•	•	SoundRelax	•	•	
Lugna situationer	•	•	•	QuickSync	•	•	•
Komfort i buller	•	•	•	AOV	•	•	•
Musik	•	•	•	Tinnitusbalans	•	•	•
Akustisk telefon	•	•	•	autoAcklimatisering	•	•	•
Specialanpassat program	•	•	•				
Streamingprogram							
Max. streamingprogram	4	4	4				
Bluetooth audio + mik	•	•	•				
Bluetooth-telefon/DECT + mik	•	•	•				
RemoteMic/Roger	•	•	•				
Audioingång	•	•	•				

Life is on

Vi på Phonak vet att god hörsel är en förutsättning för att delta i livet fullt ut. I över 70 år har vi följt vår övertygelse och utvecklat banbrytande hörsellösningar som berikar våra användares liv, socialt och känslomässigt. Livet är nu.

www.phonakpro.se